


MEISINGER Easy-Clean Scheren

Chirurgische Scheren aus demontierbaren Einzelteilen –
für eine einfache und sichere Aufbereitung

Die MEISINGER Easy-Clean Scheren aus hochwertigem Edelstahl lassen sich ganz einfach vollständig auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Rückstände unter dem Scharnier können so vollständig entfernt werden – für eine rückstandsfreie Aufbereitung*. Für die Demontage muss die Schere nur im rechten Winkel geöffnet und der obere Teil der Schere um ca. 45 Grad angehoben werden. Darüber hinaus verfügen die Scheren über eine schwarze Beschichtung, die mittels PVD Verfahren (vakuumbasierte Beschichtung) aufgebracht wird. Dank dieser schwarzen Beschichtung verfügen die Produkte insbesondere über eine hohe Härte und Langlebigkeit. Außerdem werden störende Lichtreflexe reduziert und ein blendfreies Arbeiten ermöglicht.

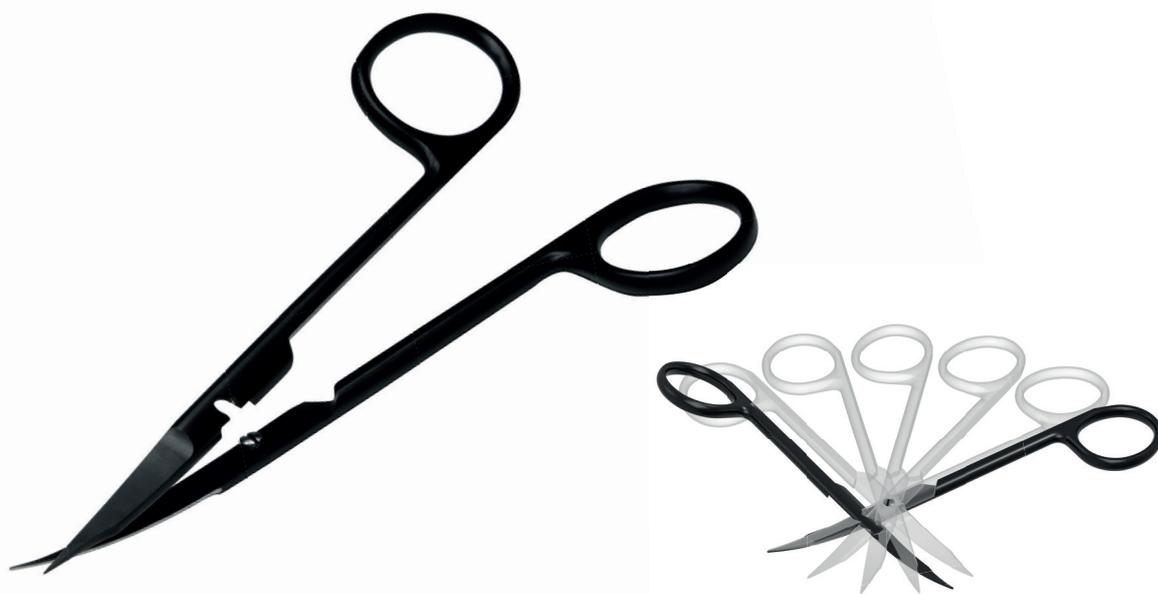

Auf einen Blick

- Chirurgische Scheren aus hochwertigem Edelstahl
- Einfache vollständige Demontage für eine rückstandsfreie Aufbereitung*
- Schwarze Beschichtung für hohe Härte und Langlebigkeit sowie blendfreies Arbeiten
- Scheren in zwei verschiedenen Ausführungen

* Entsprechend der vorgeschriebenen Aufbereitungsverfahren nach EN ISO 17664

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger
since
1888

MEISINGER Easy-Clean Scheren Bestellfax +49 2131 2012-222

	Figur	Länge	Stück / Set	Anzahl 
	CM01S	-	-	
 <small>illustrated 1:2</small>	CM001	12 cm	1	
 <small>illustrated 1:2</small>	CM002	13 cm	1	

CE 0044

Ihre Lieferadresse:

Hager & Meisinger GmbH
 Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Aufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.