

Guided-Drill-Stop-Control

Système de forage guidé pour une préparation des sites implantaire en toute sécurité

Développé avec le Dr. Henriette Lerner


Le kit Guided-Drill-Stop est utilisé pour une préparation sûre et simple des sites implantaires. Les spécificités de ce système tiennent aux forets à embouts guidant spécialement développés pour ce kit, ajoutant donc une étape intermédiaire avant un forage plus profond. Grâce à cette étape, la partie supérieure du site implantaire est élargie au diamètre souhaité, alors que la partie inférieure est utilisée pour guider le foret. Ceci permet d'éviter toute déviation de l'axe souhaité par le/la praticien/ne. De plus, les manchons-butée permettent un contrôle de profondeur du forage souhaité pour le cas.

Attention : pour éviter tout dommage des structure anatomiques, la longueur apicale additionnelle de 0,8 mm de ces instruments doit être prise en compte.

Kit compatible
Dental Ratio-Oktagon®
et Straumann®



BGS00
Guided-Drill-Stop-Control

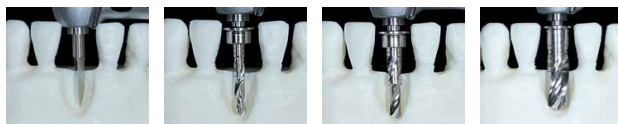

Meisinger
DENTCLINIC & ACADEMY
BADEN BADEN

Meisinger France

☎ 04 26 78 74 83


✉ commande@meisinger.fr

Meisinger
since
1888

Guided-Drill-Stop-Control


En résumé

- Forets guidant et à butées pour un contrôle maximal de la préparation du site implantaire
- Adapté pour les implants cylindriques des marques Dental Ratio-Oktagon® and Straumann®

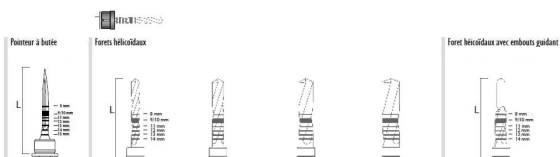

Ref.	187RF	TDS0G	TDS0G	TDS0G	TDS0G	TDS08	TDS08	TDS08
Tige ¹	204	204	204	204	204	204	204	204
Taille ²	018	020	028	035	042	028	035	042
Longueur mm	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
⌀	1.8	2.0	2.8	3.5	4.2	2.8	3.5	4.2

¹ 204=RA ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en double de mm [⌀] Diamètre externe

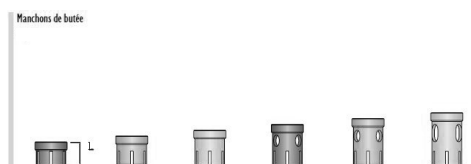

Ref.	CL031	CL032	CL033	CL034	CL035	CL036
Longueur mm	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
△ max. drilling depth mm	15.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0

Meisinger
since
1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de