

Split-Control Basic

Système d'augmentation osseuse horizontale & de condensation osseuse

Split-Control Basic est un système pour une augmentation de crête alvéolaire tout en douceur, ainsi qu'une condensation simultanée de l'os latéral, en cas de déficit osseux horizontal. A l'aide d'instruments de condensation (écarteurs-condenseurs, de type vis), il est possible de réaliser une dilatation douce et contrôlée de l'os résorbé horizontalement. De plus, l'os spongieux est condensé en raison de la forme particulière des écarteurs, de telle sorte que la stabilité primaire de l'implant inséré s'en trouve améliorée.

CSPBA
Split Control Basic



Lien vers la vidéo

Résumé

- Système peu invasif de préparation du site pour la mise en place d'un implant
- Contrôle de l'extension de l'os résorbé
- Condensation douce de l'os spongieux, amélioration de la stabilité primaire
- Pas de transfert autologue nécessaire, mise en place de plusieurs implants possible
- Préservation de la gencive

Meisinger France


☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr


Meisinger
since
1888

Split-Control Basic

Ecartement

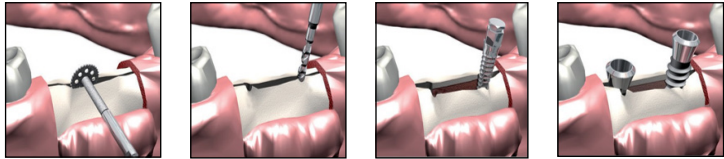

Condensation

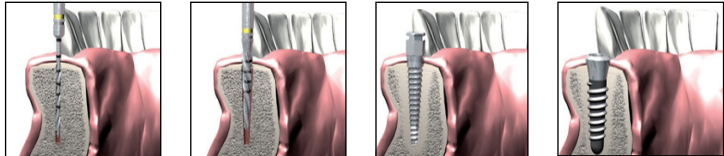

Ref.	186RF	231DC*	A2001	A2005	D2005	F2005	CA0RB	CABRA	CARA4
Tige ¹	204	204	205	-	-	-	-	204	-
Taille ²	018	100	013	027	033	040	-	-	-
Longueur mm	12.0	0.3	15.0	12.0	12.0	12.0	25.0	24.0	84.0
Δ	-	-	-	1.7	2.33	3.06	-	-	-
\square	1.8	10.0	1.3	2.7	3.3	4.0	-	-	-

¹ 204=RA, 205=RA L

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en double de mm

Δ Diamètre minimum

\square Diamètre externe

⊗ Avec la réutilisation des produits jetables, un risque d'infection ne peut être exclu et une sûreté fonctionnelle sans risque ne peut être garantie.

Recommandation

Niveau osseux minimum : largeur de la crête alvéolaire de 2 mm et hauteur 10 mm

Mise en oeuvre de directement après extraction

Nécessité de présence d'os spongieux jusqu'en haut de la crête

Meisinger since 1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de

Veuillez vous conformer aux instructions générales d'utilisation des produits médicaux Meisinger ainsi qu'aux instructions de préparation (nettoyage, désinfection et stérilisation) des dispositifs médicaux Hager & Meisinger GmbH.