

# Periimplantitis Kit

## Lange Hartmetall-Instrumente für die ideale Periimplantitis-Behandlung

Das neue MEISINGER Periimplantitis Kit beinhaltet acht perfekt aufeinander abgestimmte Hartmetallfinierer in Ei- und Flammenform zur optimalen Periimplantitis-Behandlung. Beide Formen liegen in zwei Größen und jeweils in Standard- und extra feiner Verzahnung vor. Die Arbeitsteilformen, -größen und -verzahnungen sind optimal abgestimmt auf die intraorale Bearbeitung von Titan. Alle enthaltenen Finierer besitzen einen extra langen FG Schaft (Gesamtlänge 32 mm), mit dem insbesondere schwer zugängliche, tiefe Bereiche erreicht werden können. Für die Behandlung der Periimplantitis werden die Finierer gegen den Uhrzeigersinn um den freiliegenden Teil des Implantats herumgeführt, um die Implantatoberfläche zu glätten.



2575

Made in  
Germany

### Auf einen Blick

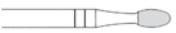
- Optimal abgestimmte Hartmetallfinierer für die effektive, intraorale Bearbeitung von Titan
- XXL FG Schaft erleichtert die Arbeit an schwer zugänglichen Implantaten
- Verschiedene Formen und Größen für jede Patientensituation
- Saubere und glatte Titanoberflächen

Bei weiteren Fragen berät Sie unser  
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger  
since  
1888

# Periimplantitis Kit

Bestellfax +49 2131 2012-222

	Figur	Schaft	Größe	empf. / max. Drehzahl	Stück / Set	Preis / Stück*	Anzahl 
	2575	-	-	-	-	119,00 €	
	HM379	XXLFG (317)	014	40.000 min <sup>-1</sup> / 300.000 min <sup>-1</sup>	1	8,50 €	
	HM379	XXLFG (317)	023	40.000 min <sup>-1</sup> / 190.000 min <sup>-1</sup>	1	8,50 €	
	HM48L	XXLFG (317)	014	40.000 min <sup>-1</sup> / 120.000 min <sup>-1</sup>	1	9,50 €	
	HM48L	XXLFG (317)	023	40.000 min <sup>-1</sup> / 120.000 min <sup>-1</sup>	1	9,50 €	
	HM379U	XXLFG (317)	014	40.000 min <sup>-1</sup> / 300.000 min <sup>-1</sup>	1	11,50 €	
	HM379U	XXLFG (317)	023	40.000 min <sup>-1</sup> / 190.000 min <sup>-1</sup>	1	11,50 €	
	HM48LU	XXLFG (317)	014	40.000 min <sup>-1</sup> / 120.000 min <sup>-1</sup>	1	11,50 €	
	HM48LU	XXLFG (317)	023	40.000 min <sup>-1</sup> / 120.000 min <sup>-1</sup>	1	11,50 €	

\* zzgl. MwSt.

CE 0044

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:  _____  _____  _____  _____	Ihre Lieferadresse:  _____  _____  _____  _____
--	---

**Hager & Meisinger GmbH**  
 Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany  
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222  
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.

85FL118 - 0317